



Aufrichthilfen im Bad

Boden-Deckenstange POLE

Eine sehr bewährte und universell einsetzbare Aufstehhilfe ist z. B. die Boden-Deckenstange POLE mit schwenkbarem Griff. Sie lässt sich einfach zwischen Boden und Decke verspannen, ohne das Löcher in Fliesen, etc. gebohrt werden müssen.

Der um 360 Grad schwenkbare Griff rastet in 8 verschiedenen Stellungen ein. So ist es möglich, den Griff exakt dort zu positionieren, wo er benötigt wird.

Mit Hilfe der POLE ist komfortables und vor allen Dingen sicheres Hinsetzen und Aufstehen in vielen verschiedenen Lebenslagen wieder selbständig möglich.


Die POLE wird ebenso häufig im Bad wie auch im Schlafzimmer vor dem Bett oder im Wohnzimmer vor dem Sofa, eingesetzt.

Wichtige Informationen:

- Montage ohne Werkzeug und Bohren
- Höhe individuell einstellbar von 210 cm – 300 cm
- 360 Grad schwenkbarer Griff mit 8 Rastungen
- belastbar bis 136 kg



rehasstage GmbH
www.rehasstage.de

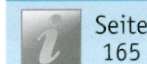

Seite
165



Fachhandel



Aufrichthilfen im Bad

Badewannengriff HUGO

Die flexibel gelagerte (siehe Fotos) Innenaufgabe mit Gummipads garantiert vollflächige, sehr kräftige Befestigung, egal wie geschwungen/geneigt die Badewanneninnenseite ist. Der sehr rutschsichere Griff ist höhenverstellbar und bietet Ihnen absolut sicheren Halt beim Ein- und Aussteigen aus der Wanne.

Ein zusätzlicher Griff, den Sie Innen links oder rechts anbringen können, hilft Ihnen, sich aus dem Liegen in aufrechte Position zu ziehen. Es sind verschiedene individuelle Einstellungen möglich, damit HUGO sich dem Badewannenrand anpassen kann. Zum Lieferumfang gehören auch 3 kleine, selbstklebende Abstandplatten, sollte der Badewannenrand einen Versatz haben oder zu Dünn sein.


Aufgebaut ist HUGO mit dem mitgelieferten Werkzeug in wenigen Minuten.

Wichtige Informationen:

- Material: Kunststoff, Edelstahl, Antirutschgummi
- Gewicht: 2,5 kg
- Griffhöhe ab Badewannenrand: 8cm – 14cm
- Klemmbreite: verstellbar von 2,9cm – 13,5cm
- Belastbar bis: 100 kg vertikal und horizontal



rehasstage GmbH
www.rehasstage.de

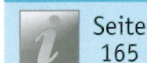

Seite
165



Fachhandel



ROTH® MOBELI® Mobile Haltegriffe

Sicherheit im Blick mit Vakuum Sicherheitsanzeige



Wofür einen mobilen Haltegriff?

Mobeli Haltegriffe bieten Ihnen den größtmöglichen Freiraum bei der Positionierung. Ob zur Förderung der Selbstständigkeit, bei häuslicher oder ambulanter Pflege, die schnelle, leichte und sichere Befestigung der Mobeli Haltegriffe hat sich vieltausendfach bewährt.

Für die Anbringung der Haltegriffe benötigen Sie nur eine saubere, plane und poren-dichte steife Oberfläche - kein Bohren oder Anschrauben. Die Haltegriffe „saugen“ sich fest. Sie sind schnell zerlegbar und deshalb auch auf Reisen ein idealer Begleiter.

Das System Mobeli - genial einfach und sicher!

Die im Schwarzwald produzierten Haltegriffe sind als einfacher Haltegriff, als variabler Teleskophaltegriff und in einer Hochlastvariante (QuattroPlus) erhältlich. Sie brauchen einen winkelverstellbaren Handlauf, eine zuverlässige Einstiegshilfe für die Badewanne (QuattroPower Wanne) oder ein vielseitiges Stützsystem (QuattroPower Stütz), z. B. um leichter und sicherer von der Toilette aufstehen zu können, dann kann Ihnen ein Haltegriff aus der Mobeli-Produktfamilie helfen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann finden Sie weitere Informationen zum durchdachten System Mobeli auf unserer Internetseite unter: www.mobeli.de

Produktinformationen

Das Stützsystem QuattroPower Stütz verteilt mit seinen 4 Saugtellern, die auf die Wand wirkenden Hebelkräfte. Vorteil: Es kann sogar an gefliesten Hohlraumwänden (z.B. 2-lagige Gipskarton-Beplankung) befestigt werden. Die QuattroPower Stütz Haltesysteme sind für ein maximales Benutzergewicht von 80 kg ausgelegt.

Der mobile Vakuum-Haltegriff QuattroPlus kann an der Wand und über Eck befestigt werden, er dient als horizontale Trainingsgreifstange und als Umsetzhilfe. Er ist für ein maximales Benutzergewicht von bis zu 160 kg zugelassen.



ROTH GmbH
www.roth.gmbh



Seite
166



Fachhandel

Mobeli Vakuum-Sicherheitsanzeige

Diese Innovation der Mobeli Haltegriffe ist schlicht revolutionär: **Der erste Haltegriff, bei dem permanent der Vakuumzustand - und damit die Haftkraft - gemessen wird.** Denn die Mobeli Sicherheitswippe prüft kontinuierlich das Vakuum. Ist die Warn-Wippe im Hebel versenkt, stimmt die Haftkraft und der Griff ist in allen Richtungen maximal belastbar. Fährt die Warn-Wippe aus und der rote Wippenrand wird sichtbar und fühlbar, muss der Mobeli Haltegriff gelöst und erneut angesaugt werden. Mobeli Haltegriffe sind somit geeignet für Personen mit Sehschwäche, denn die Warn-Wippe ist bei Vakuumverlust gut tastbar. Diese visuelle und taktile (Zwei-Sinne-Prinzip) Erkennbarkeit erfüllt die Schutzziele der DIN 18040:2010.



Alle MOBELI Haltegriffe wurden vom TÜV Süd nach der aktuellsten Norm ISO17966:2016 erfolgreich getestet. Die Mobeli Vakuum-Sicherheitsanzeige erfüllt alle Verpflichtungen und ist auf dem „Stand der Technik“ für Medizinprodukte.